

Mnova12.0.X インストール方法

本マニュアルの画面は Windows 用のものです。他の OS の場合画面などが多少異なる場合がありますので適時よみかえてください。

1. インストール CD

Mnova インストール CD には以下のいずれかの OS 用のインストールファイルが格納されています。

MnovaNMR,MS,Suite 等の本体

Windows Vista, 7, 8, 10(32 ビット OS)

MestReNova-X.X.X-XXXX-.msi

Windows Vista, 7, 8, 10(64 ビット OS)

MestReNova-X.X.X-XXXX_x64.msi

Mac OS 10.3 以降

MNova-X.X.X-XXXX.dmg

MnovaLite の場合

Windows Vista, 7, 8, 10 MestReNova-LITE-X.X.X-XXXX-.msi

Mac OS 10.3 以降 MestReNova-LITE -X.X.X-XXXX.dmg

X の部分はバージョン、ビルドに対応した数字です。

MestreLab Research 社 <http://mestrelab.com/> の Download ページから最新版または他の OS のインストールファイルをダウンロードすることもできます。

2. インストール方法

• Windows

MestReNova-X.X.X-XXXX-.msi ファイルをダブルクリックして、インストール画面の指示にしたがってください。

• Mac OS X

MNova-X.X.X-XXXX.dmg ファイルを、ダブルクリックして、インストール画面の指示にしたがってください。

• Linux

su コマンドで root にユーザ変更または root ユーザでログインして作業してください。

ターミナル(シェル)を起動し、ユーザインストール CD のインストールファイルのあるディレクトリ(/mnt/cdrom など)に移動、または適当なディレクトリに MestReNova-X.X.X-XXXX.i386.Linux.rpm(X はバージョンビルド数字、Linux は対応ディストリビューション名)ファイルをコピーし、ターミナルから

rpm -ivh MestReNova-X.X.X-XXXX.i386.Linux.rpm (リターン)
とコマンド入力してください。(インストール先 /usr/local/share/MestReNova)

•qNMR 等のプラグインでインストールファイルが zip ファイルである場合、Mnova を起動し、Mnova 画面にインストールファイルをドラッグ&ドロップしてください。

3. ライセンスの取得

Mnova のライセンスファイルを取得するために PC に固有の HOST ID 情報が必要となります。

インストール後に表示される、あるいはデスクトップに作成された MestReNova アイコンをクリックもしくは StartMenu ⇒ すべてのプログラム ⇒ MestReNova ⇒ MestReNova を選択して下記 Registration Wizard 画面を表示してください。

表示されたウィンドウ下部(図 1)に Host ID が表示されておりますので、Host IDを選択コピーし E メールで弊社サポート(support@las.jp)までお送りください。

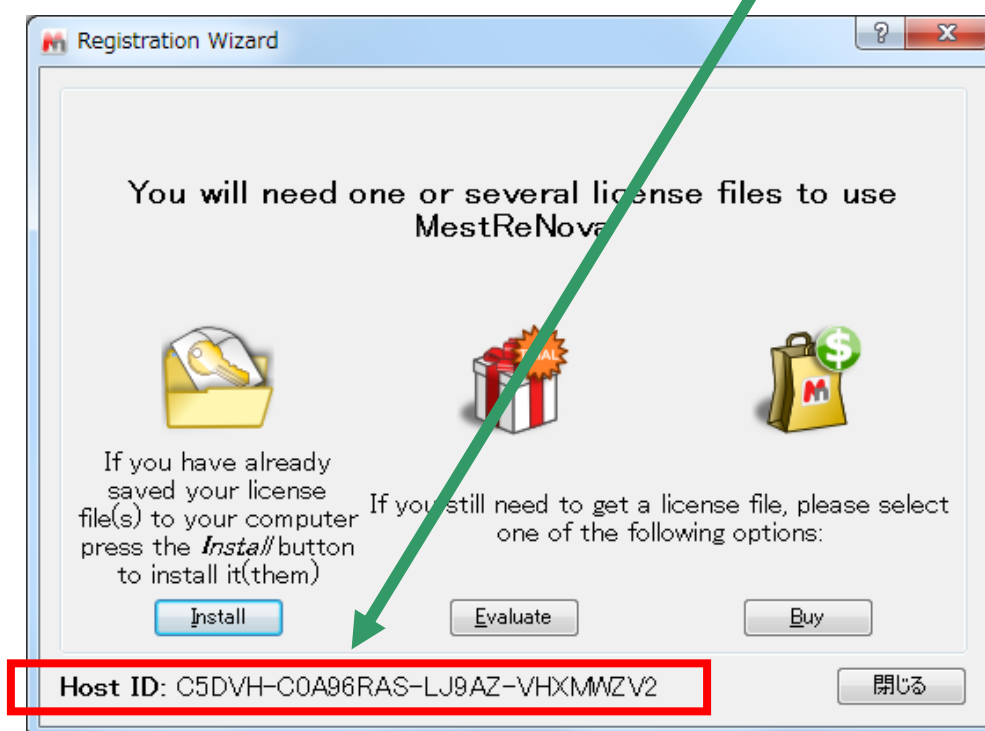


図1

4. ライセンスファイルインストール

E メールまたは CD で送付されてきた、ライセンスファイル XXXXXX.lic (XXXXXX.zip の場合もあり)を Mnova をインストールした PC で認識できるようにしてください。

デスクトップに作成された MestReNova アイコンをクリックもしくは Start Menu ⇒ すべてのプログラム ⇒ MestReNova ⇒ MestReNova を選択して Mnova を起動してください。

Mnova 画面にライセンスファイルをドラッグ&ドロップする、あるいは表示されたウィンドウ(図 2)の “Install” ボタンをクリックしてください。

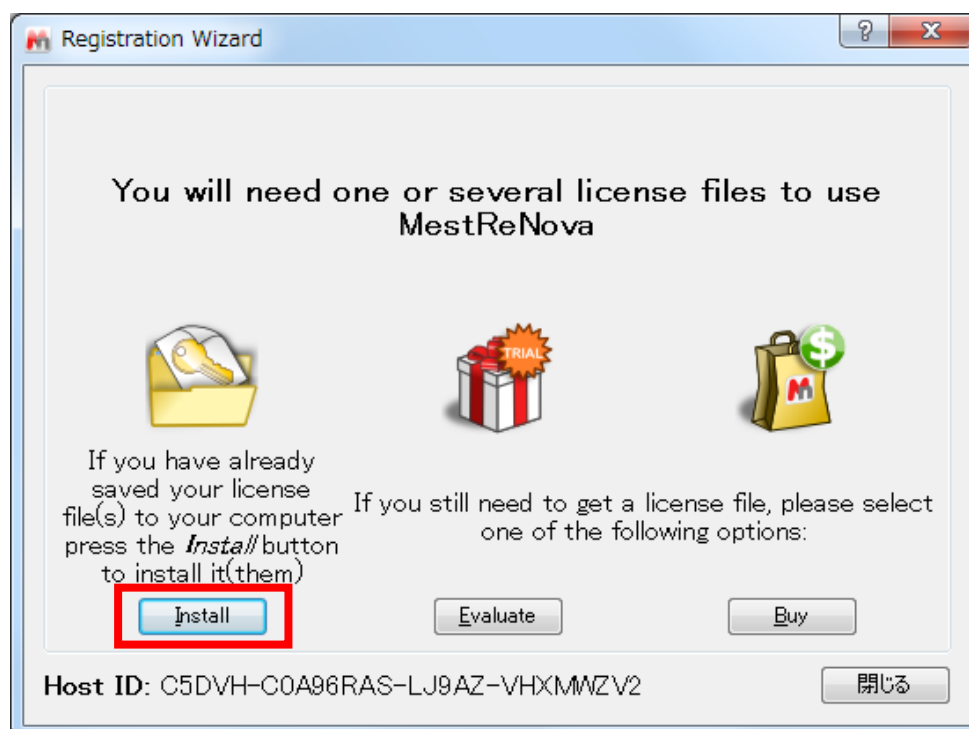


図 2

“Select License file”ウィンドウが表示されますので、弊社より送りましたライセンスファイル XXXXXX.lic (XXXXXX.zip の場合もあり)を選択し、“開く”をクリックしてください。ライセンスファイルが認識されましたら、「Mnova を閉じて再起動」してください。

お問い合わせ

株式会社エルエイシステムズ

support@las.jp

〒110-0005 東京都台東区上野 1-11-5 時計会館ビル 1F

TEL:03-5812-5311

FAX:03-5807-4050